

# ICX-MAGELLAN®

...jeszcze nigdy szablony implantologiczne nie dawały tak wielu możliwości...




**399,-** PLN


Każdy szablon  
do 14 punktów  
cena zawiera VAT

## Schemat postępowania z pacjentem w zależności od sytuacji wewnątrzustnej

Pacjent z brakiem pojedynczych zębów (powyżej 3 własnych stabilnych zębów w różnych miejscach)

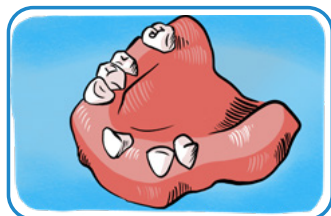


Wykonujemy pacjentowi CBCT lub DVT, format DICOM 3.0 (pełny łuk żuchwy lub szczęki)

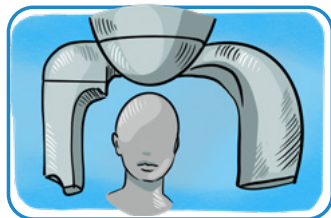


Wykonujemy skan modelu gipsowego lub skan wewnątrzustnym skanerem w formacie STL




Planujemy szablony

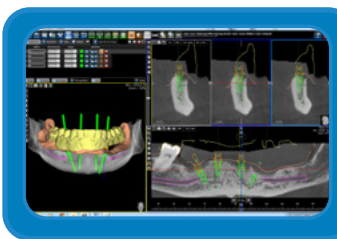

Pacjent z pozostałością uzębienia <3 zębów (lub uzębieniem wyłącznie na jednym skrzydle)

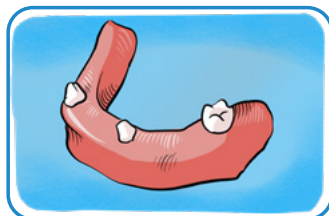

Wykonujemy replikę protezy (całkowite uzębienie) z akrylu

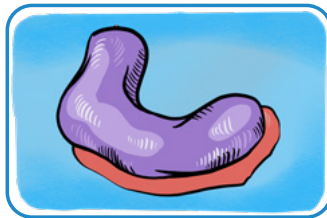

TAK

NIE

Pacjent z pełną protezą



Czy proteza jest wykonana z elementami metalowymi?

Przyklejamy do protezy markery RTG (tak aby były na powierzchni) od 3 do 6 markerów na różnych skrzydłach i stronach (językowa/policzkowa)



Wykonujemy pacjentowi CBCT lub DVT, format DICOM 3.0 z protezą umieszczoną w ustach



Wykonujemy CBCT lub DVT format DICOM 3.0 samej protezy z markerami RTG na podstawie



3Z Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 85, Piekary Śląskie 41-940  
Biuro Obsługi Klienta / Zamówienia:  
+48 32 767 55 66, +48 32 767 70 70, zamowienia@3z.pl  
Biuro: info@3z.pl / Wsparcie techniczne: +48 697 301 210

Chętnie odpowiem na Państwa pytania:  
Zbigniew Szczęć  
ICX-MAGELLAN EKSPERT  
magellan@3z.pl / +48 697 301 210

